

TM
CASADA
healthcare



< relaxmyway



BODYSHAPE
— Limited Edition —



< relaxmyway

Sedan företaget grundades år 2000 har namnet CASADA stått för högklassiga produkter inom området friskvård och fitness.

Idag är CASADA – produkter tillgängliga över hela världen. Det som utmärker CASADAs produkter är deras kontinuerliga utveckling, omisskännliga design och deras absoluta fokus på att förbättra livskvaliteten samt deras pålitliga och utmärkta kvalitet.

GRATULERAR!

Med köpet av denna massageapparat har du visat medvetenhet om din hälsa.

För att du ska kunna njuta av fördelarna med din massageapparat på lång sikt ber vi dig att läsa och följa bruksanvisningen noggrant.

Vi önskar dig mycket nöje med din personliga BodyShape Limited Edition.

Innehållsförteckning

12	Säkerhets instruktioner
12	Leveransens omfattning
13	Teknisk Data
13	Montering/Uppstart
14	Specialfunktioner
14	Fjärrkontroll
15	Felsökning
16	Förvaring / Underhåll
16	EU-försäkran om överensstämmelse
17	Garantivillkor

SÄKERHETS INSTRUKTIONER



Läs följande instruktioner noggrant innan du tar din massageapparat i bruk för att säkerställa problemfri drift och optimal effektivitet. Vänligen spara denna bruksanvisning för vidare användning!

- Massageapparaten överensstämmer med erkända tekniska principer och de senaste säkerhetsföreskrifterna.
- Denna enhet kräver inget underhåll. Eventuella reparationer får endast utföras av auktoriserad expertpersonal. Felaktig användning och otillåtna reparationer är inte tillåtna av säkerhetsskäl och leder till förlust av garantin.
- Rör aldrig nätkontakten med våta händer.
- Undvik att enheten kommer i kontakt med vatten, höga temperaturer och direkt solljus.
- För att undvika risken för kortslutning, koppla ur nätsladden när den inte används under en längre tid.
- Använd inte skadade kablar, kontakter eller lösa uttag.
- Om kontakter eller sladdar är skadade måste de bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller av kvalificerad personal.
- Vid fel, koppla omedelbart bort från elnätet.
- Missbruk eller felaktig användning utesluter allt ansvar för skada.
- För att undvika överdriven stimulering av muskler och nerver bör den rekommenderade massage tiden på 30 minuter inte överskridas.
- Varje massage – även handmassage – måste avstås från under graviditeten eller om ett eller flera av följande besvär förekommer i massageområdet: nyligen inträffade skador, trombotiska sjukdomar, alla typer av inflammationer och svullnader samt cancer. Det rekommenderas att konsultera en läkare innan du får massage för behandling av åkommor och sjukdomar.
- Använd inte den här enheten när du kör.
- Om du är beroende av elektriska hjälpmedel t.ex. pacemakers, var noga med att konsultera din läkare för medicinsk rådgivning innan du tar en massage.
- Det medföljande förpackningsmaterialet ska inte användas som leksak.
- Denna utrustning får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk, mental förmåga och en person utan erfarenhet eller kunskap om utrustningen, om övervakning eller instruktioner om användningen av utrustningen har säkerställts. på ett säkert sätt så att hoten var begripliga. Barn ska inte leka med utrustningen. Obevakade barn bör inte utföra rengöring och underhåll av utrustning.

Leveransens omfattning

- Strömförsörjningsenhet 24 Volt / 12 Volt
Bruksanvisning
- Massagedyna

Technical Data BodyShape LE

Mått:	176 x 61 cm
Vikt:	2,1 kg
Spänning:	input: AC 100-240V ~ 50/60Hz, 800 mA output: DC 12V, 2500 mA
Nominell effekt:	max. 30 watt
Automatisk körtid:	10 minutes
Certifikat:	



För din egen säkerhet utrustar vi BodyShape massagemadrassen med ett skydd mot överhettning. Värme skapas i motorerna när de utsätts för stor påfrestning och övertryck. Innan detta kan skapa någon risk och efter en körtid på 10 minuter, stängs BodyShape Limited Edition av automatiskt och kommer bara att tillåta att slås på igen efter en lämplig stilleståndstid.

På samma sätt bör du ge din kropp några viloperioder. För att undvika att anstränga dina muskler för mycket rekommenderar vi att du inte överskrider en kontinuerlig massage på 30 minuter.

Montering / Uppstart

1. Öppna kartongen, ta ut nätadaptern och placera den inom räckhåll.
2. Anslut den medföljande adaptern till massagemadrassen och anslut sedan adaptern till uttaget.
3. För att slå på massagemadrassen, tryck på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen. LED-lampan lyser rött och enheten startar direkt i automatiskt läge M1 med medelintensitet.

Hantering

AUTOMATISKA PROGRAM

Det automatiska läget masserar i 5 olika resplaner. Varje program (M1 – M5) pågår i 10 minuter och väljs med knappen "Mode". Under de automatiska programmen kan du välja mellan de 3 intensiteterna när som helst och slå på och stänga av värmen. Efter att ha avslutat det valda programmet stängs enheten av automatiskt.

MANUELL HANTERING

Via fjärrkontrollen kan du också välja endast ett av de fem olika vibrationsfälten. Genom att göra detta är valet av intensitet och värme fortfarande möjligt när som helst. Efter den rekommenderade drifttiden på 30 minuter stängs enheten av oberoende av varandra.

Specialfunktioner



VIBRATION

Vibrationen försätter hela kroppen i jämna svängningar som har långtgående effekter. Stimulerande för cirkulationen och avslappnande för muskelsystemet.



VÄRME

En djupt penetrerande och värmeutstrålade effekt där man kan slappna av perfekt. Denna funktion är särskilt fördelaktig för muskelspänningar på grund av den djupgående effekten.



AUTOMATISKA PROGRAM

5 speciellt utvecklade automatiska program för hela kroppen, som erbjuder ett stort utbud av olika massagetekniker. Dessutom kan du även slå på värmefunktionen om du vill.



BIL ADAPTER

Den praktiska biladaptern gör din massageapparat portabel.

Val av speciella automatiska program Massagemadrassen kommer med 10 intelligenta inbyggda vibrationsfält, uppdelade i 5 zoner, samt 4 värmefält, som är fördelade i vardera två zoner.



FJÄRRKONTROLL

MASSAGE OMRÅDEN


NACKE	2 vibrationsfält för en nackmassage
ÖVRE RYGG	2 vibrationsfält för massage i övre delen av ryggen
LÄND RYGG	2 vibrationsfält för massage i nedre delen av ryggen
BEN	2 vibrationsfält för massage i benområdet
FÖTTER	2 vibrationsfält för fotmassage

AUTOMATISKA PROGRAM

M1	Vibrationsfält masserar samtidigt i en upp- och nedgående rytm
M2	Långa vibrationsintervaller i förändring ÖVRE RYGG – LÄNDRYGG – BEN – FÖTTER – HALS
M3	Korta intervaller av individuella och kombinerade vibrationsfält HALS & ÖVRE RYGG - BEN & FÖTTER – LÄNDRYGG, efteråt alla fält inbördes i en snabb rytm
M4	Snabba, korta vibrationsintervaller i förändring ÖVRE RYGG & NEDRE RYGG – HALS & FÖTTER
M5	Vibrationsfält masserar samtidigt i en upp- och nedgående vågig rytm

FUNKTIONER

PÅ/AV	Med denna knapp kan du antingen slå PÅ eller AV massagemadrassen
VÄRME	PÅ och AV-brytare för värmefälten
INTENSITET	Justerbar intensitet i 3 nivåer
LÄGE	Val av särskilda automatiska program

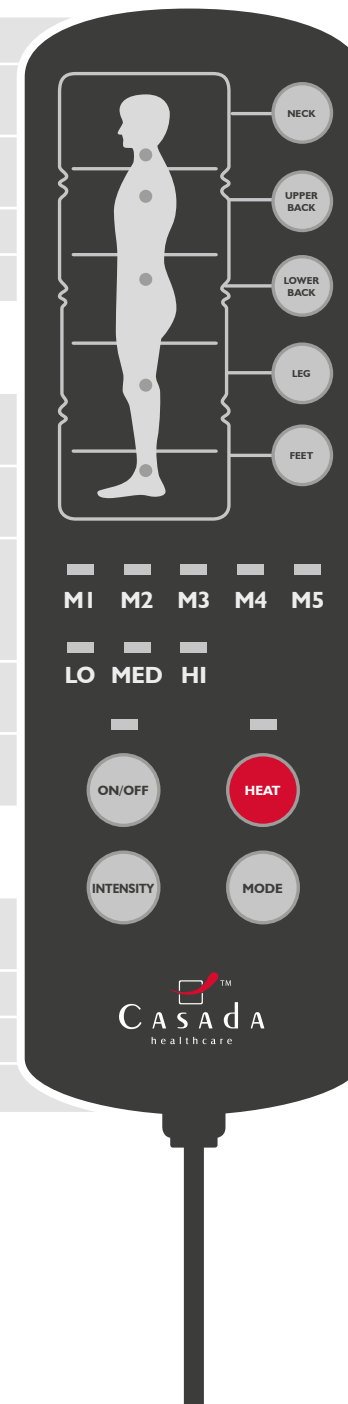

Felsökning

Fault

Enheten är ansluten till elnätet, men varken enheten eller fjärrkontrollen fungerar.

Remedial action

- Kontrollera om alla anslutningar är korrekt ihopparade. Se till att strömförsörjningen är helt ansluten.
- Enheten kan överhettas om den används permanent. Stäng därför av den, koppla bort den från elnätet och låt den svalna helt.

Förvaring / Underhåll

Med regelbundet underhåll kan du öka livslängden på BodyShape Limited Edition och säkerställa säker drift hela tiden.

1. Rekommenderad förvaring: Torr, fri från damm.
2. Håll vätskor eller öppen låga borta från enheten.
3. Rengör enheten med en läderimitation och med en torr mjuk trasa.
4. Koppla bort enheten från elnätet när den inte används.

EU-försäkran om överensstämmelse

Överensstämmer med europeiska regulatoriska standarder EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Garantivillkor

Återförsäljaren beviljar den lagstadgade garantitiden för produkten som beskrivs på nästa sida. Garantin gäller från inköpsdatum. Inköpsdatumet visas av försäljningskvittot.

Återförsäljaren ska kostnadsfritt reparera eller byta ut produkter registrerade i Tyskland som visar sig vara defekta. Delar som utsätts för slitage som tygöverdrag täcks inte. För att hävda ditt krav, returnera helt enkelt den defekta produkten med försäljningskvittot innan garantiperioden löper ut.

Garantikravet gäller inte om det konstateras att ett fel har uppstått t.ex. genom yttre påverkan eller till följd av reparation eller ändring som inte har utförts av tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Den garanti som ges av säljaren är begränsad till reparation eller utbyte av produkten. Enligt denna garanti har tillverkaren eller säljaren inget ytterligare ansvar och ansvarar inte för skador som orsakats av att bruksanvisningen inte följts och/eller felaktig användning av produkten.

Om säljarens inspektion av produkten visar att garantianspråket avser ett fel som inte täcks av garantin eller att garantitiden har löpt ut, ska kostnaden för inspektionen och reparationen stå för kunden.

Juridisk anmärkning: Allt innehåll innehåller inte läkande uttalanden. Diagnos och behandling av sjukdomar och andra fysiska störningar kräver behandling av en läkare, icke-medicinsk läkare eller terapeut. Uttalandena är strikt informativa och får inte användas som ersättning för en professionell medicinsk behandling. Varje användare är skyldig att fastställa genom noggrann undersökning och, om så krävs, efter samråd med en specialist, om applikationen är den rätta för deras specifika fall. Varje dos eller applicering sker på användarens risk. Vi tar avstånd från alla läkande uttalanden eller löften.



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Images and texts are subject to the copyright of Casada International GmbH and may not be used for other purposes without express confirmation.

Copyright © 2018 Casada International GmbH.
All rights reserved.

