



< relax in style

MINIWELL **TWIST**





## < relax in style

Sedan grundandet år 2000 står namnet CASADA för högkvalitativa produkter på hälso- och fitnessmarknaden. Idag finns CASADA-utrustning tillgänglig i 37 länder över hela världen.

Ständig vidareutveckling, en omisskännlig design och en fokuserad inriktning mot en bättre livskvalitet är det som kännetecknar CASADA-produkter, lika mycket som deras oslagbara och pålitliga kvalitet.

## GRATULERAR!

---

Med köpet av denna massageapparat har du visat medvetenhet om din hälsa.

För att du ska kunna njuta av fördelarna med din massageapparat på lång sikt ber vi dig att läsa och följa bruksanvisningen noggrant.

Vi önskar dig mycket nöje med din personliga Miniwell Twist.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

6	Säkerhets instruktioner
17	Inuti paketet
17	Uppstart
17	Teknisk Data
18	Utrustning / funktioner
19	Kontrollpanel
20	Felsökning
20	Förvaring / skötsel
20	Försäkran om överensstämmelse
21	Garantivillkor

## SÄKERHETS INSTRUKTIONER



Läs noga igenom följande instruktioner innan du använder denna träningsutrustning för att säkerställa att den fungerar korrekt och har optimal effekt. Vänligen spara dessa bruksanvisningar!

- Denna massageapparat överensstämmer med de erkända principerna för teknik och gällande säkerhetsföreskrifter.
- Denna utrustning är underhållsfri. Alla nödvändiga reparationer måste utföras av en auktoriserad fackman. Felaktig användning och otillåtna reparationer är förbjudna av säkerhetsskäl och gör garantin ogiltig.
- Rör aldrig nätkontakten med våta händer.
- Undvik att utrustningen kommer i kontakt med vatten, höga temperaturer och direkt solljus.
- Se till att koppla ur utrustningen från eluttaget under längre perioder då den inte används för att eliminera risken för kortslutning.
- Använd inte skadade kontakter, sladdar eller lösa uttag. Skadade stickproppar eller sladdar måste bytas ut av tillverkaren, servicerepresentanten eller kvalificerad personal. Koppla omedelbart bort utrustningen i händelse av fel. Vi tar inget ansvar för skador till följd av felaktig eller felaktig användning.
- För att förhindra överdriven stress på muskler och nerver bör den rekommenderade massagetiden på 30 minuter inte överskridas.
- Använd aldrig spetsiga eller vassa föremål.
- All massage – även massage för hand – måste undvikas under graviditet och/eller vid ett eller flera besvär inom massageområdet: huvudsjukdomar nyligen, trombotiska sjukdomar, inflammationer och svullnad av alla slag samt cancer. Samråd med din läkare rekommenderas innan någon behandling av åkommor och åkommor.
- Använd inte enheten när du kör bil.
- Om du är beroende av elektriska hjälpmedel som en pacemaker, vänligen rådfråga din läkare före användning i alla fall.

## INUTI PAKETET

- Miniwell Twist
- Adapter
- Bil adapter

## UPPSTART

Anslut adaptorn till enheten och anslut sedan nätkontakten till eluttaget. Slå nu på enheten via kontrollpanelen.

Med biladaptorn kan Miniwell Twist även användas när du reser (får inte användas när du kör!). Anslut bara biladaptorn till cigarettändaren.

## TEKNISK DATA

Mätenhet: 35 x 23 x 15 cm VIKT 1,3 kg

### POWER SOURCE

USA	input: 120V~50~60HZ 700mA / output: 12.0 VDC 2500mA
CANADA	input: 120V~50~60HZ 700mA / output: 12.0 VDC 1600mA
AUSTRALIA	input: 100-240V~50~60HZ 1000mA / output: 12.0 VDC 1600mA
EUROPA	input: 200-240V~50HZ / output: 12.0 VDC 1600mA

Rated power: 19,2 Watt


Certificates:



## UTRUSTNING/ FUNKTIONER



HEATING

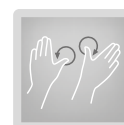

KNEADING

Miniwell Twist kan hjälpa dig att skapa din egen personliga välbefinnande oas i bekvämligheten av ditt hem. Sätt dig bara ner och låt den massera bort all din vardagsstress.

Dess ergonomiskt böjda form smyger sig harmoniskt mot delar av kroppen som nacke, axlar, rygg, fötter och mage. Med sina fyra optimalt anordnade massagehuvuden masserar Miniwell Twist med behagliga cirkulerande rörelser på önskat område av din kropp. Genom att stimulera cirkulationen kommer dina muskler att värmas upp och eventuella spänningar släpps försiktigt.

Regelbunden massage med Miniwell Twist stimulerar nervbanornas funktioner och aktiverar ämnesomsättningen. Cirkulationen stimuleras och släpper envisa spänningar. Blockeringar och störningar i de inre organen kan påverkas positivt.

Alla som någonsin har upplevt fördelarna med en shiatsumassage kommer alltid ihåg den lugnande effekten. Samtidigt är det inte alls viktigt om denna profylax av besvär används eller bara används för avslappning och aktivering av livsenergi.

I Shiatsu/Knådningsläge gäller den centrala frågan om att människor ses som en "enskild enhet". Med denna massagemetod kombineras traditionell kunskap om Fjärran Österns medicin och moderna behandlingsmetoder. Shiatsu-massage ger kroppen avslappning, vitalitet och förnyelse. Dessutom har den en lugnande effekt på stress och ökar en allmän känsla av välbefinnande.



## KONTROLLPANEL

### [1] PÅ / AV

Använd denna knapp för att starta Miniwell Twist.  
Funktionen Knådning/Shiatsu och uppvärmning startar.

För att stänga av Miniwell Twist, tryck på knappen igen.



## FELSÖKNING

Error	Adjustment
Massageapparaten kan inte fungera trots att den är ansluten till strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera anslutningen av adaptern.</li><li>• Enheten kan bli överhettad efter långvarig användning. Den kommer automatiskt att svalna för att återgå till sitt normala tillstånd. Stäng av strömmen och låt enheten svalna i 30 till 50 minuter.</li></ul>

## FÖRVARING/ SKÖTSEL

Regelbunden skötsel förlänger livslängden på din Miniwell Twist samtidigt som den säkerställer säker drift hela tiden.

1. Rekommenderad förvaring: torr, fri från damm.
2. Håll vätskor och öppen eld borta från Miniwell Twist.
3. Rengör utrustningen med en torr, mjuk trasa.
4. Koppla alltid ur Miniwell Twist när den inte används.



## FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Corresponds to the European guidelines 2006/95/EC.

## GARANTIVILLKOR

Återförsäljaren beviljar den lagstadgade garantitiden för produkten som beskrivs på nästa sida. Garantin gäller från inköpsdatum. Inköpsdatumet visas av försäljningskvittot.

Återförsäljaren ska kostnadsfritt reparera eller byta ut produkter registrerade i Tyskland som visar sig vara defekta. Delar som utsätts för slitage som tygöverdrag täcks inte. För att hävda ditt krav, returnera helt enkelt den defekta produkten med försäljningskvittot innan garantiperioden löper ut.

Garantikravet gäller inte om det konstateras att ett fel har uppstått t.ex. genom yttre påverkan eller till följd av reparation eller ändring som inte har utförts av tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Den garanti som ges av säljaren är begränsad till reparation eller utbyte av produkten. Enligt denna garanti har tillverkaren eller säljaren inget ytterligare ansvar och ansvarar inte för skador som orsakats av att bruksanvisningen inte följts och/eller felaktig användning av produkten.

Om säljarens inspektion av produkten visar att garantianspråket avser ett fel som inte täcks av garantin eller att garantitiden har löpt ut, ska kostnaden för inspektionen och reparationen stå för kunden.

Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
phone (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0  
fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30  
info@casada.com  
www.casada.com

Copyright Images and texts are subject to the copyright of Casada International GmbH and may not be used for other purposes without express confirmation.

Copyright © 2019 Casada International GmbH. All rights reserved.



